

SoKINOX™

La soluzione per la terapia con ossido d'azoto



SoKINOX™

Il nuovo dispositivo medico sviluppato da Air Liquide Healthcare per la somministrazione ed il monitoraggio della terapia con ossido d'azoto per inalazione (iNO)

- Funziona con tutte le modalità di ventilazione e tipologie di pazienti
- Sincronizza istantaneamente la somministrazione di ossido di azoto con flusso costante con tutti i tipi di ventilatore polmonare

Schema di SoKINOX™ ed elenco degli accessori

- Stazione
- 2 bombole di VasoKINOX B11
- 2 riduttori di pressione
- 2 tubi flessibili di NO
- 1 bombola di ossigeno
- 1 tubo flessibile O₂



SoKINOX™ si collega a 2 bombole con commutazione automatica per garantire continuità di trattamento



SISTEMA DI BACKUP E MODALITÀ MANUALE

- Il sistema di erogazione di NO principale e il sistema di erogazione di NO di backup sono separati l'uno dall'altro e funzionano in modo indipendente
- Il sistema di erogazione di NO di backup eroga NO e O₂ al paziente attraverso un sistema di ventilazione e non dipende dall'alimentazione elettrica

SCHERMATA DI TRATTAMENTO

Schermata di trattamento e visualizzazione dei valori misurati




ALLARMI E INFORMAZIONI

SoKINOX™ integra allarmi visivi e acustici per contribuire a garantire la sicurezza del paziente


Indicazione degli allarmi attivi

- Se un allarme viene attivato, nella barra di stato compare un messaggio
- Premendo sulla barra di stato, si apre l'elenco di tutti gli allarmi attivi

MENU

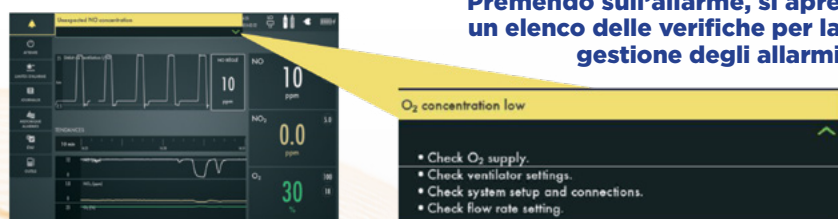

3 colori per 3 livelli di priorità

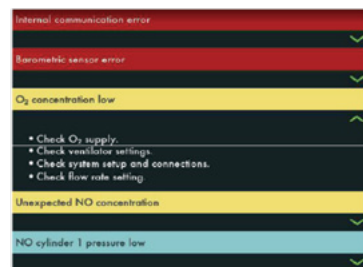

- **Priorità alta > Rosso**
- **Priorità media > Giallo**
- **Priorità bassa > Blu**

SoKINOX™



SOKINOX™ È UN SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELL'OSSIDO D'AZOTO PER INALAZIONE (iNO)

Universale

➤ SoKINOX™ funziona con tutte le modalità di ventilazione, per tutte le tipologie di paziente, grazie all'affidabile sensore di flusso

Intuitivo

➤ L'ampio schermo touchscreen a colori offre una visualizzazione chiara e ben organizzata delle informazioni, rendendo il dispositivo semplice ed intuitivo

Compatto

➤ Il design compatto include un sistema di somministrazione e monitoraggio con ventilazione manuale da usare in caso di emergenza o reclutamento alveolare

Contatti

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
email: it-customer@airliquide.com

Numero Verde
800-442443

Selezionare opzione 4

www.airliquidehealthcare.it

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d'igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall'ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.